

Quntas 鲲鹏

智能超声外科手术设备

超乎 所想

Beyond

Imagination



国家 超声骨组织手术设备 行业标准编制单位出品
家 软组织切割止血设备 National Standard Definer

Quntas 鲲鹏


智能超声外科手术设备

Quntas鲲鹏超声外科手术设备采用超高性能的集成式设计，可灵活用于不同组织的破碎、吸引、切割、清创等，满足多种临床治疗需求，提高手术效率与效果。



智能主机

INTELLIGENT CONSOLE

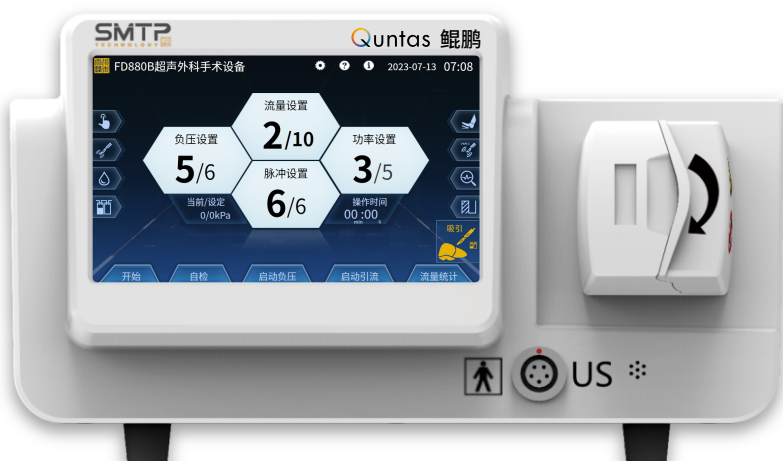

自动识别不同手柄，快速进入对应功能模式，参数预设



搭载自研iSTPT®、TPT技术，与组织智能交互，保障安全



更低功率，高效操作，安全护航



可单独负压吸引，减少器械更换，缩短手术时间



操作界面简易，连接便捷，大幅提高操作效率



创新手柄

INNOVATIVE HANDPIECE

52kHz 超声吸引手柄

- 创新手控功能，自由掌控
- 电致伸缩原理，无需水冷，满足长时间手术需求



创新手柄，品质更优

- 换能稳定高效发热少，热损伤更低
- 外壳钛合金材质，坚固耐用，握持感好，使用方便
- 可高温高压等方式灭菌，成本更低、灭菌更彻底
- 创新手柄，参数更适宜组织，降低潜在损伤风险



39kHz 超声骨刀手柄

高频纵向振动，无旋转旁振，更安全 ○

可匹配近40种三类NMPA注册刀头，支持开放、通道、微创等多种术式 ○



刀头多样

MULTIPLE TIPS

所有刀头均为钛合金材质，坚固耐用，可拆卸，同种模式下术中仅需更换刀头，无需更换手柄，操作简单。

超声吸引刀头 ▶▶▶

精准安全：刀头内径细至1mm，振幅 $\leq 0.3\text{mm}$ ，精准破碎去除靶组织，减少误伤周围结构风险，显著降低并发症，缩短住院时间

术野清晰：刀头双侧预置吸引孔，吸除水雾，术野清晰



平口刀头

用于消融结合弱的软组织，如肿瘤、脂肪等



齿形刀头

用于消融钙化、纤维化的软组织



标准吸引刀头

适用于质地柔软的靶组织



细杆吸引刀头

适用于需要精细操作的靶组织



粗杆吸引刀头

适用于可快速去除的靶组织



腹腔镜刀头

供腹腔镜手术用



弯角刀头

适用于狭窄部位靶组织去除，视野更好

超声清创刀头 ▶▶▶

多种刀头高效清除失活组织及异物，并破坏生物膜，促进愈合，最大限度保留健康组织



蹄形刀头

适用于表面较大伤口



双球形刀头

适用于伤口囊袋、窦道、腔洞



耙形刀头

适用于狭小、难处理角度伤口



大匙形刀头

适用于表面较大伤口



专业配件


PROFESSIONAL ACCESSORIES

配件专业化设计，操作简单，节约成本



SinglePedal™通用脚踏

脚踏小巧轻便，操作简单

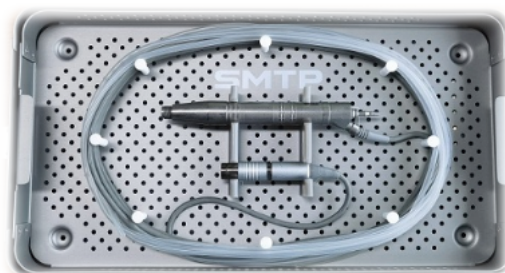

灭菌盒

手柄和其他配件分区放置，减少导线缠绕，便于整理收纳



应用科室

APPLICATION DEPARTMENT

超声吸引

- 肝胆胰外科，神经外科、胃肠外科、泌尿外科、普通外科、整形外科、妇科、胸外科等

超声骨刀

- 脊柱外科、骨肿瘤科、神经外科、颌面外科、耳鼻喉科、关节外科、创伤外科、整形外科、手足外科、疼痛科、儿科等

超声清创

- 烧伤科、创面治疗中心、创伤科、内分泌科、急诊科等

联系我们

北京水木天蓬医疗技术有限公司

电 话: (86)010-88572898

Email: marketing@smtpmmed.com

网 址: <http://www.smtpmmed.com>

地 址: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路29号B2301室